


KRAV TIL TRAPPER

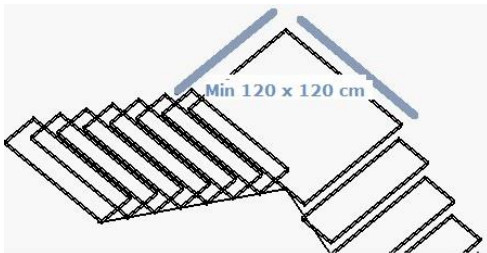

Trappeafsatsen/reposen skal være minimum 120 cm på hver led, for at chaufføren kan komme rundt med trappemaskine

På indvendige trapper må ting ikke stå i vejen for en sikker transport. Ingen løse tæpper på trappen

Trinhøjde maksimum 20 cm
Trindybden minimum 11 cm

Ved udvendige trapper må der ikke være løse sten eller fliser på trinene. Trappen skal være fri for sne og is



El-kørestole og el-scooter kan ikke beføres på trapper

Hvis borgeren med støtte fra chaufføren kan skifte til en transportstol, kan vi køre med trappemaskine

Dækkene skal være korrekt oppumpet for at sikre, at hjulene kan bremses. Flade eller punkterede dæk kan afvises.

KRAV TIL SAMLET VÆGT



Person og kørestol må maksimalt veje 160 kilo i alt

KRAV TIL KØRESTOL

Bag på kørestolen kan bøjler, antivip eller lignende gøre det umuligt at montere kørestolen på trappemaskinen

Kan bøjler eller lignende afmonteres uden brug af værktøj og kørestolen uden problemer fastmonteres til trappemaskinen, vil Movia normalvis kunne køre borgeren



Hjulbredde på minimum 37 cm og maksimum 73 cm



Bredde på rygstykke på maksimum 53 cm



Højde på minimum 33 cm til motorkasse og minimum 50 cm til batterikasse